



PCR fülke



PCR-1000

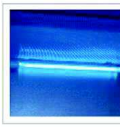
PCR-800/1200/1300/1500

**LCD kijelző**

LCD kijelző (kivéve PCR-1000, a PCR-1000 kijelzője LED)

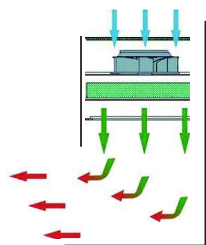
**Vízhatlan csatlakozók**

Két vízhatlan csatlakozó található a hátsó falon kisműszerek fülkén belüli optimális használatához.

**UV Lámpa**

253.7 nanométeres emisszió

a leghatékonyabb dekontaminációhoz.

**Polc IV rúddal**

■ Szennyezett levegő

■ HEPA szűrt levegő

■ Környezeti levegő

**Oldalsó üvegablak**

Világosság és láthatóság a fülkén belül, amely világos és nyitott munkakörnyezetet biztosít

ELŐNYÖK

1. LED kijelző
2. UV sterilizációs rendszer.
3. HEPA filter hatékonysága 99.999% 0.3µm-en.
4. Áramkimaradás esetén memóriafunkcióval.
5. Interlock funkció: az UV lámpa csak csukott ablak mellett kapcsolható be a felhasználó védelmében.
6. UV időzítő (0-90 perc): A következő kísérlet előkészítéséhez az UV lámpa automatikusan kikapcsol a beállított idő lejárta után.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Modell	PCR-800	PCR-1000	PCR-1200	PCR-1300	PCR-1500
Külső méret (Sz*Mé*Ma)	800*700*1770mm	1000*705*1770mm	1200*700*1770mm	1300*700*1770mm	1500*700*1770mm
Belső méret (Sz*Mé*Ma)	700*595*550mm	900*595*560mm	1100*595*550mm	1200*595*550mm	1400*595*550mm
Munkaterület magassága	750mm				
Anyag	Főtest: hidegen tekercselt acél antibakteriális porbavonattal. Munkalap: 304 Rozsdamentes acél				
Első és oldalsó ablakok	5mm-es erősített üveg; anti-UV Motorizált Manuális				
Max nyílás	260mm	320mm	260mm	260mm	260mm
Pre-Filter	Poliészter szál, Mosható				
HEPA szűrő	99.999% hatékonyság 0.3µm-en				
Légsebesség	0.3-0.5m/s, állítható sebesség				
Zaj	≤65dB				
UV Lámpa	20W*1	20W*2	30W*1	30W*1	40W*1
	253.7 nanométeres emisszió, UV időzítővel				
Világítás	LED 8W*2	40W*1	LED12W*2	LED12W*2	LED12W*2
	! :1000Lux				
Polc IV rúddal	Rozsdamentes acél, 502*150*50mm (Sz*Mé*Ma)				
Görgő	Univerzális görgő szintező lábakkal				
Fogyasztás	400W	300W	600W	600W	600W
Vízhatlan csatlakozó	Kétő, teljes terhelés ≤500W				
Tápegység	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz				
Standard tartozékok	UV lámpa, Fluoreszcens lámpa, állvány, Vízálló csatlakozó*2, Polc IV rúddal				
Opcionális tartozékok	Elektromos, állítható magasságú állvány				
Bruttó tömeg	130kg	150kg	170kg	180kg	200kg